

FIMの動画記録

1, FIM動画記録の必要性

FIMは数値での管理が行われています。数値では、他療法士、医師などが患者の実態を把握するには、情報不足です。それを第三者が見てもわかるためには動画記録が必要です。監査でのFIM記録の客観的説明として使用します。

2, FIM動画記録の方法

1) カメラ、スマートフォンでの記録

- ①カメラ、スマートフォンで、FIMの各動作を動画記録します。
- ②記録した動画から、必要な個所の動画のみを切り出します。
- ③FIMの記録が終了したら、外付けHDD,サーバに保管します。

2) Windows端末（タブレット、ノートPC）に内蔵・接続されたカメラで記録

- ①FIM動画記録専用のアプリを起動
- ②撮影日、患者IDを入力し、FIMの種類（食事、整容など）を選択
- ③録画を行い、終了で停止します。
- ④FIMの記録が終了したら、外付けHDD,サーバに保管します。


1) カメラ、スマートフォンでの記録



録画された動画



- 1, FIMの種類毎に動画ファイルを指定
切り出し時間を指定
切り出しを行う
- 2, 切り出しが完了したら外部メディア (HDD等) に保存する。

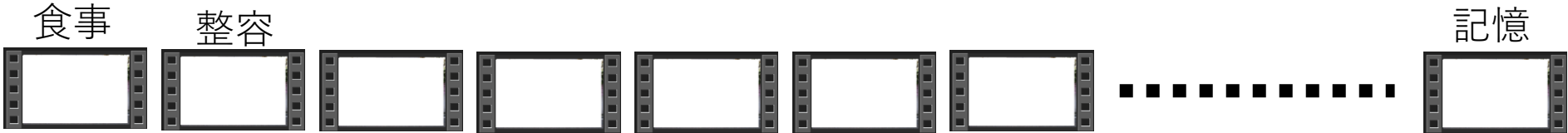

切り出された動画

2) Windows端末 (タブレット、ノートPC) に内蔵・接続されたカメラで記録



- 1, 撮影日、患者IDを指定
- 2, FIMを選択して、設定
- 3, 動画記録 開始・停止
- 4, 別のFIMを選択し、撮影
- 5, 以降、同様操作を行う
- 6, 録画したかの確認
「録画確認」でどのFIMを録画しているか表示
- 「再生」で、選択したFIM動画を再生
- 7, 撮影が完了したら
外部メディア (HDD等) に保存する。

食事

整容

記憶



保存された動画